

PRÉSENTATION DU NOUVEAU DISPOSITIF MYOSURE® MANUAL

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE

pour l'ablation de pathologies utérines intra-cavitaires inférieures à 1 cm

Utilisé avec l'hystéroscope MyoSure®, le NOUVEAU dispositif MyoSure® MANUAL vous permet de réséquer les tissus sous visualisation directe.



« Plus rapide que je ne le pensais ! »

Dr Kees Yedema, MCH La Haye, Pays-Bas


« Je trouve l'utilisation du dispositif MyoSure MANUAL plus rapide, plus facile et plus sûre »

Mr Martyn Underwood, Princess Royal Hospital, R-U



Une chaussette de récupération intégrée

qui permet la confirmation visuelle de l'ablation des tissus pendant l'intervention. Possibilité de prélever jusqu'à 4 grammes de tissus et de les envoyer au laboratoire d'anatomo-pathologie.

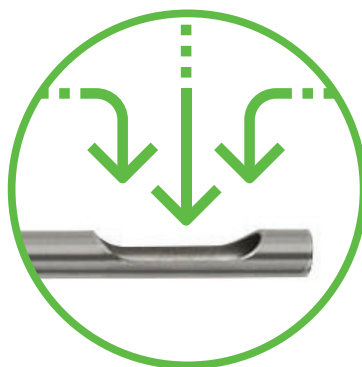

Une source de vide interne

qui évite le besoin d'une aspiration externe et de système de gestion des fluides.



Un fonctionnement manuel

qui permet un contrôle multifonction : de la lame, du vide ainsi que de l'échantillon.

MyoSure MANUAL

Conçu pour une facilité d'utilisation et une précision accrues sous visualisation directe.



MyoSure® MANUAL offre plusieurs avantages :



Il améliore l'efficacité et l'efficience.



Permet le diagnostic de prélèvements de l'endomètre

CONFIGURATION SIMPLIFIÉE

Le dispositif MyoSure® MANUAL nécessite uniquement :



POCHE DE SOLUTION SALINE DE 1 L



HYSTÉROSCOPE MYOSURE®



TUBULURES D'ENTRÉE ET DE SORTIE (INCLUSES)

NON REQUIS :

- Générateur
- Système de gestion des fluides
- Source de vide externe

Contactez votre représentant local pour en savoir plus
Pour commander, contactez le service clientèle commandes.france@hologic.com

INFORMATIONS DE COMMANDE

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
MYOSURE® MANUAL - Lot de 3 dispositifs	20-403ML
HYSTÉROSCOPE À LENTILLES CYLINDRIQUES MYOSURE® AVEC CANAL D'ÉVACUATION AMOVIBLE	40-250
KIT DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ À USAGE UNIQUE POUR L'HYSTÉROSCOPE ET SON CANAL D'ÉVACUATION - 10 KITS PAR BOÎTE	40-902
PANIER DE STÉRILISATION POUR HYSTÉROSCOPE MYOSURE®	MME-02584

INFORMATION DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Le dispositif d'ablation tissulaire MyoSure® MANUAL (dispositif de classe IIa) est destiné à des interventions hystérocopiques intra-utérines exécutées par des gynécologues formés à la résection et à l'ablation des tissus. Le système d'élimination des tissus MyoSure® ne doit pas être utilisé chez les femmes enceintes ni chez les patientes présentant une maladie inflammatoire pelvienne, une tumeur maligne du col de l'utérus ou un cancer de l'endomètre précédemment diagnostiqué.

Lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d'utilisation. • Fabricant : Hologic Inc (USA) • Dispositif pris en charge en partie par l'assurance maladie • Numéro interne : PB-00608-FRA-FR Rev.001 • 12/2017.

©2017 Hologic, Inc. Hologic, MyoSure, MyoSure Manual et les logos associés sont des marques commerciales ou marques déposées d'Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

MyoSure® MANUAL