

HOLOGIC®

Dernière génération de **NovaSure®**

NovaSure V5

Ablation de l'endomètre



FIABLE



INNOVANT



CONCEPTION CENTRÉE
SUR LA PATIENTE



FIABLE

Plus de 20 ans de données cliniques
 97 % de patientes satisfaites²
 Taux d'aménorrhée de 75 % à 5 ans³
 86 % des patientes ont évité l'hystérectomie à 10 ans⁴




INNOVANT

Plus de 3 millions d'interventions réalisées dans le monde ont permis d'améliorer continuellement la conception du dispositif en fonction des retours des utilisateurs.



CONCEPTION CENTRÉE SUR LA PATIENTE

Traitement adapté à chaque anatomie cervicale et utérine pour un résultat optimal.

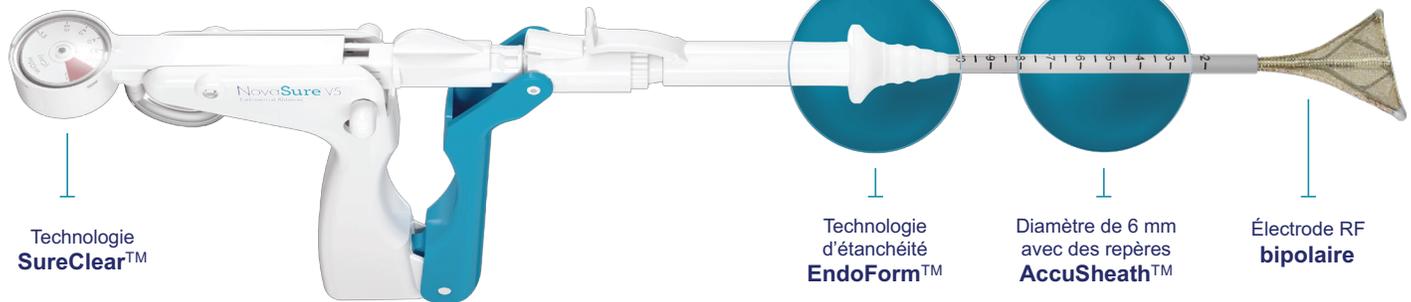

Technologie SureClear™

Le système unique d'élimination des fluides SureClear d'Hologic garantit une aspiration intégrée à travers l'électrode par un contact constant avec les tissus tout en éliminant simultanément la vapeur, le sang et autres sous-produits.

Technologie d'étanchéité EndoForm™

Le collier cervical du NovaSure® V5 intègre la technologie EndoForm conçue pour s'adapter à chaque canal cervical et aux variantes anatomiques.

Repères AccuSheath™

NovaSure® V5 comprend une gaine d'un diamètre extérieur de 6 mm dotée de repères AccuSheath conçus pour augmenter la précision et la fiabilité du positionnement du dispositif.

Électrode RF bipolaire

L'énergie de radiofréquence bipolaire rapide et contrôlée est adaptée aux mesures de la cavité utérine de la patiente.



La technologie **SmartDepth™** contrôle et mesure l'impédance des tissus pour une profondeur d'ablation personnalisée pour chaque patiente.

NovaSure® V5

Ablation de l'endomètre



CE 2797 EC REP Hologic BV, Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem, Belgium.

RÉFÉRENCES

¹Basé sur les données commerciales d'Hologic Inc., nombre d'unités délivrées de 2004 à 2018. ²Baskett TF, Clough H, Scott TA. NovaSure bipolar radiofrequency endometrial ablation: report of 200 cases. American College of Obstetricians and Gynecologists. 2005;27(5):473-476. ³Gallinat A. An impedance-controlled system for endometrial ablation: Five-year follow up on 107 patients. J Reprod Med. 2007; 52:467-472. ⁴Herman M, Penninx J, Mol B, Bongers M. Ten-year follow-up of a randomised controlled trial comparing bipolar endometrial ablation with balloon ablation for heavy menstrual bleeding. BJOG 2013;120:966-970.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES L'ablation de l'endomètre NovaSure® est réservée aux femmes pré-ménopausées ayant des règles abondantes dues à des causes bénignes et qui ne souhaitent plus avoir d'enfants. L'intervention NovaSure n'est pas destinée aux femmes atteintes d'un cancer de l'utérus connu ou suspecté, d'une infection génitale, urinaire ou pelvienne active, ou qui portent un DIU. L'ablation de l'endomètre NovaSure n'est pas une intervention de stérilisation. Il existe des effets indésirables graves, même s'ils sont rares, comme les blessures thermiques, les perforations et les infections. Les effets indésirables temporaires peuvent comprendre des crampes, des nausées, des vomissements, un écoulement vaginal et un saignement vaginal léger. Dites aux patientes de vous contacter en cas d'effets indésirables possibles liés à l'utilisation de ce produit. Si vous ou une personne de votre entourage présente un effet indésirable lors de l'utilisation de notre produit, contactez votre médecin traitant.

Classe IIb (CE 544674), Fabricant : Hologic, Inc.. Lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d'utilisation.

SS-01364-FRA-FR Rév. 001 ©2023 Hologic, Inc. Tous droits réservés. Les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Pour obtenir des informations spécifiques sur les produits disponibles à la vente dans un pays en particulier, contactez votre représentant Hologic local. Hologic, AccuSheath, EndoForm, NovaSure, SmartDepth, SureClear et les logos associés sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Ces informations sont destinées aux professionnels de santé. Elles ne doivent pas être considérées comme des sollicitations ni faire la promotion de produits lorsque ces activités sont interdites. La documentation Hologic étant distribuée par l'intermédiaire de sites Internet, de diffusions en ligne et de salons professionnels, il n'est pas toujours possible d'en contrôler la disponibilité. Pour obtenir des informations spécifiques sur les produits disponibles à la vente dans un pays en particulier, contactez votre représentant Hologic local. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Hologic local ou envoyer un mail à l'adresse france@hologic.com

POUR COMMANDER NOVASURE V5

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION DU PRODUIT
NSV5-003	Dispositif à usage unique NovaSure® V5 (conditionnement par 3 unités)
NSV5-001	Dispositif à usage unique NovaSure® V5 (conditionnement par 1 unité)