

Panther® Plus*

Accroît la capacité l'autonomie et le rendement en 24 heures.

Une valeur pour votre laboratoire. Comprend les économies du système Panther® plus les économies supplémentaires suivantes :

**GAINS EN MAIN D'ŒUVRE**

Augmentation de la capacité jusqu'à 120 MTU (600 tests) en bénéficiant d'une autonomie de 13,5 heures avant le prochain chargement

Rejet des déchets liquides directement dans l'évier ou l'évacuation du laboratoire ; plus d'élimination manuelle

**GAINS DE TEMPS**

Accès et remplacement des fluides universels pendant le traitement des tests ; plus d'interruptions avant ou après le poste

Élimination des déchets solides à la demande pour un traitement ininterrompu et un rendement accru jusqu'à 210 tests en 24 heures

Remplacement des fluides et élimination des déchets pendant le traitement pour **réduire les activités au démarrage**, et pouvoir démarrer rapidement les analyses afin d'obtenir des résultats plus rapidement

**GAINS FINANCIER**

Optimisation de l'utilisation de la poche pour déchets et fluides universels avec un remplacement moins fréquent, réduisant ainsi le volume et les dépenses liées aux consommables à usage unique

Mise à jour au sein du laboratoire pour offrir plus de fonctions, d'autonomie et de rendement sans remplacement d'équipement ni d'infrastructure

Les options Panther® Plus confèrent une plus grande souplesse

■ Option 1

Fluides/déchets en continu

■ Option 2

Fluides/déchets en continu + rejet des déchets liquides

■ Option 3

Fluides/déchets en continu + extension MTU

■ Option 4

Fluides/déchets en continu + rejet des déchets liquides+ extension MTU



Panther Plus permet de choisir les mises à jour les mieux adaptées aux besoins de votre laboratoire.

* Les mises à jour ne seront pas disponibles lors du lancement de Panther Fusion.

PANTHER®

Spécifications

Option 1 : Fluides/déchets en continu

Description	Le module fluides/déchets en continu est une mise à jour du compartiment inférieur du Panther®, permettant d'accéder au (1) remplacement d'un ensemble de fluides universels en cas d'épuisement et (2) au retrait des conteneurs de déchets liquides et solides pendant le traitement, pour une flexibilité et un rendement accrus.
Dimensions	Pas de modification par rapport au système Panther.
Poids du Panther avec module	365 kg
Spéc. électriques	Pas de modification par rapport au système Panther.
Dissipation thermique	Pas de modification par rapport au système Panther.

Option 2 : Fluides/déchets en continu + rejet des déchets liquides



Description	L'option 1 plus la possibilité de rejeter directement les déchets liquides dans une évacuation au sol ou un évier réduit le travail manuel.
Dimensions	144 cm l x 81,5 cm P x 175 cm H
Poids du Panther avec module	368 kg
Spéc. électriques	Pas de modification par rapport au système Panther.
Dissipation thermique	Pas de modification par rapport au système Panther.

Option 3 : Fluides/déchets en continu + extension MTU

Description	L'option 1 plus l'extension MTU permet de charger jusqu'à 125 MTU (600 tests) simultanément pour accroître la capacité et l'autonomie.
Dimensions	149 cm l x 81,5 cm P x 175 cm H
Poids du Panther avec module	422 kg
Spéc. électriques	Pas de modification par rapport au système Panther.
Dissipation thermique	Pas de modification par rapport au système Panther.

Option 4 : Fluides/déchets en continu + rejet des déchets liquides+ extension MTU

Description	L'option 1 plus (1) la possibilité de rejeter les déchets liquides directement dans une évacuation au sol et (2) le module d'extension MTU offrant le chargement de 125 MTU (600 tests), augmentent la flexibilité, le rendement et l'autonomie.
Dimensions	149 cm l x 81,5 cm P x 175 cm H
Poids du Panther avec module	427 kg
Spéc. électriques	Pas de modification par rapport au système Panther.
Dissipation thermique	Pas de modification par rapport au système Panther.

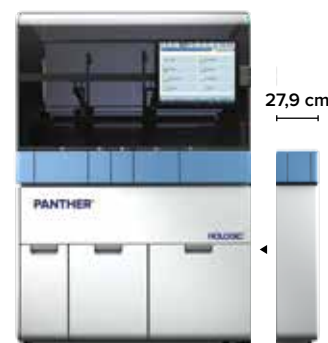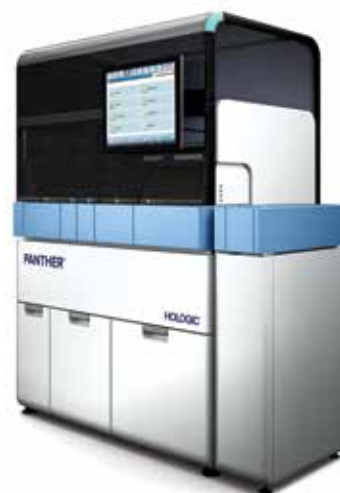

Le module d'extension MTU est une mise à jour au sein du laboratoire du système Panther.



Le module fluides/déchets en continu est une mise à jour au sein du laboratoire du système Panther.